

Descargá la App



Available on the iPhone
App Store



<https://bit.ly/oilapp>

GET IT ON
Google Play



<https://bit.ly/ooplay>

Descargá la aplicación de WebCheck desde la App Store o Google Play.
Después de la instalación, ingresá con tus credenciales.

Tomá tus muestras de aceite



1

Retirá la etiqueta de la muestra del formulario y pégala en la botella de muestra.



2


Tomá tu muestra respetando cuidadosamente cada paso del procedimiento.



3

Asegurate de que la tapa esté bien ajustada y limpiá cualquier exceso de aceite de la botella de muestra.

Completá el envío de escaneando el QR del equipo (con Asset Tag o Booklet)

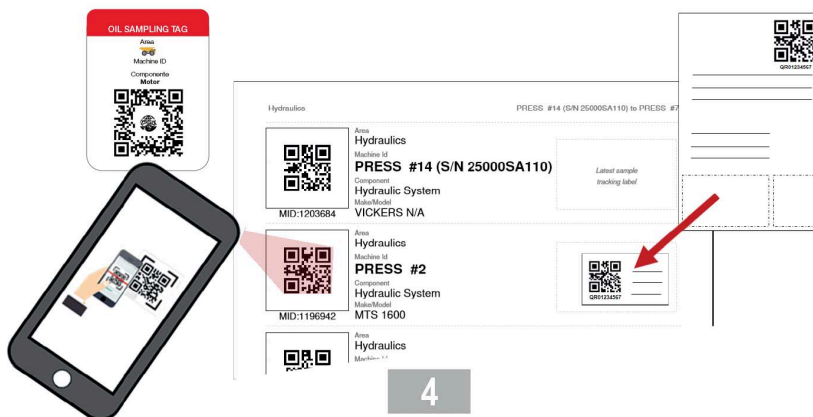


4

Utilizá la App, para escanear el código QR del equipo (desde el booklet de activos o desde el Asset Tag). En caso de utilizar el booklet, pegá el QR en el equipo correspondiente desde donde se tomó la muestra.




5

Luego, escaneá la etiqueta de la muestra, completá la información de la muestra y enviá la muestra.

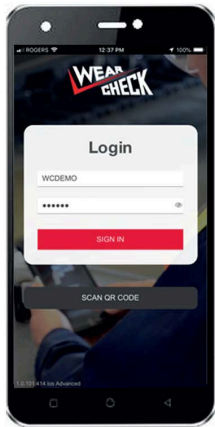

1

Iniciá sesión en la aplicación utilizando tus credenciales de WebCheck.

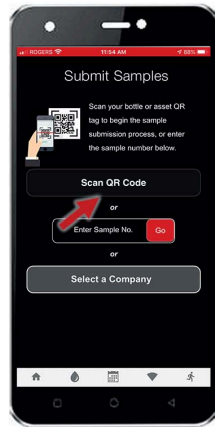


2

Una vez que hayas iniciado sesión, haz clic en el botón "Escanear código QR".



3

Escanéa el equipo ya sea con el QR de la tarjeta de identificación presente en el equipo o con el QR del booklet de equipos.

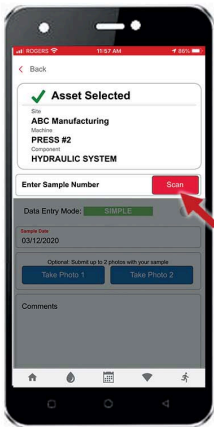


4

Seleccioná el activo que corresponda dentro de la pantalla de envío de muestra y luego seleccioná "Escanear".




5

Escanéa el QR del envase de la muestra correspondiente al equipo seleccionado.

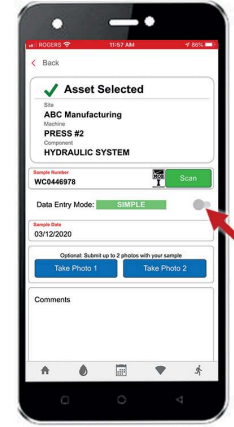


6

La muestra ahora está vinculada al equipo. Utilizó el modo de entrada de datos "SIMPLE" para agregar información.

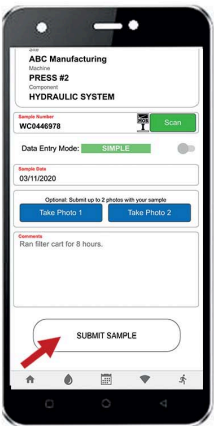

7

Seleccioná la fecha de la muestra, agregó fotos de la muestra que consideres relevante informar, podés añadir comentarios. Al finalizar seleccioná

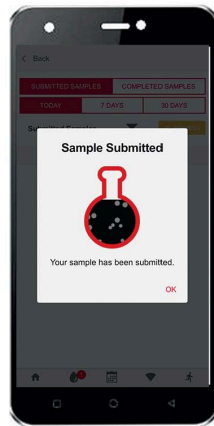


8

La información de la muestra ha sido enviada al laboratorio donde se escaneará el QR y se recuperará automáticamente la información pre-cargada de la muestra.





9

Las muestras enviadas se enumeran. Para actualizar la información de una muestra, deslice hacia la izquierda. Para eliminar una muestra, deslice hacia la derecha.

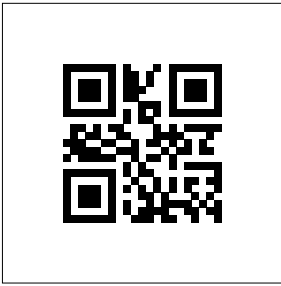



EID:4258841

Machine ID
312270
Make/Model
312270

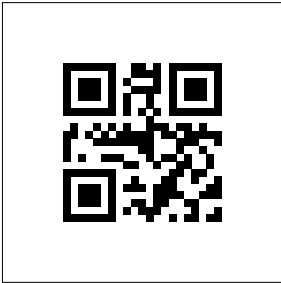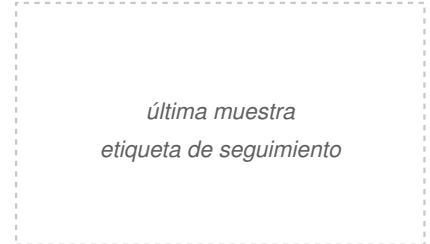



EID:4258844

Machine ID
320015
Make/Model
320015

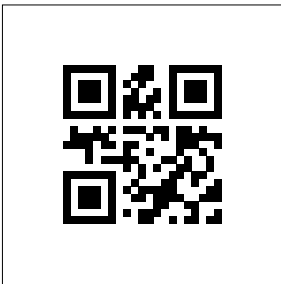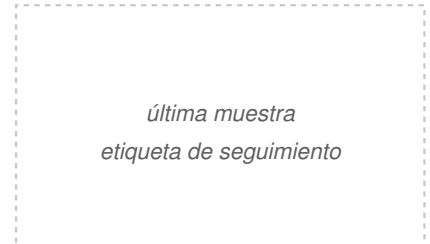



EID:4258847

Machine ID
77894
Make/Model
77894

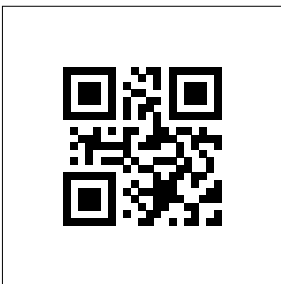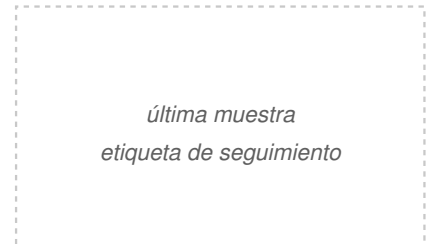


EID:4258850


Machine ID
803068
Make/Model
803068

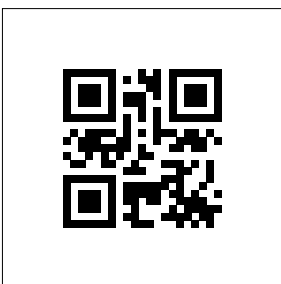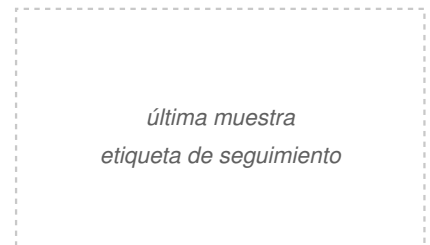


EID:4258843

Machine ID
312270
Make/Model
Ariel 312270

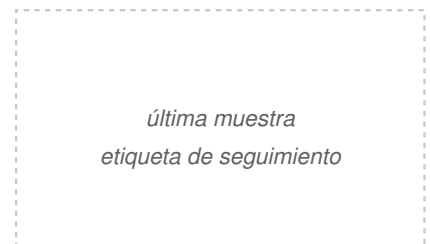

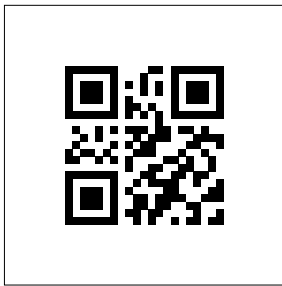


Machine ID
77894
Make/Model
Ariel 77894

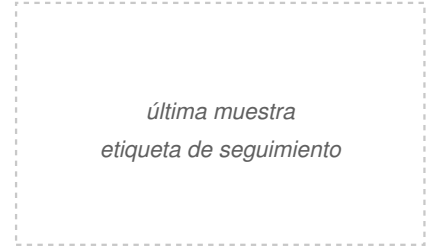


*última muestra
etiqueta de seguimiento*

EID:4258849

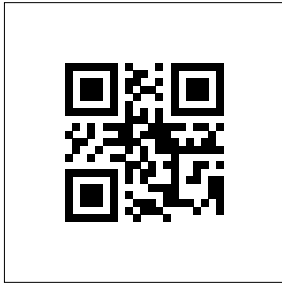


Machine ID
803068
Make/Model
Ariel 803068

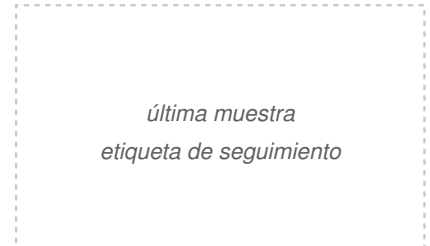


*última muestra
etiqueta de seguimiento*

EID:4258852

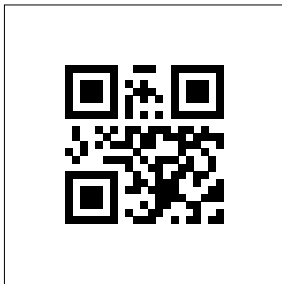


Machine ID
312270
Make/Model
Caterpillar 312270

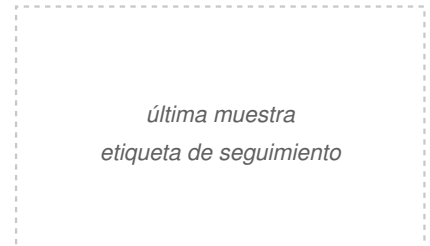


*última muestra
etiqueta de seguimiento*

EID:4258842

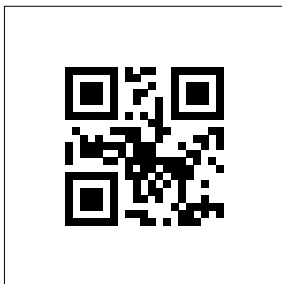


Machine ID
320015
Make/Model
Caterpillar 320015

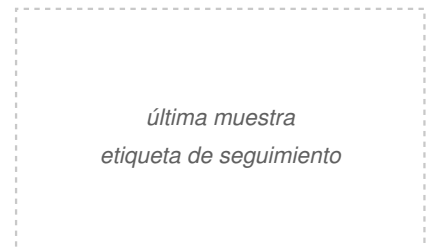


*última muestra
etiqueta de seguimiento*

EID:4258845

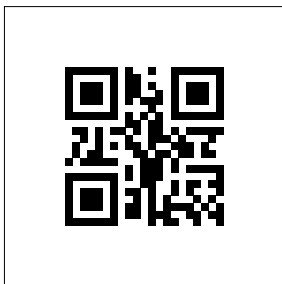


Machine ID
77894
Make/Model
Caterpillar 77894

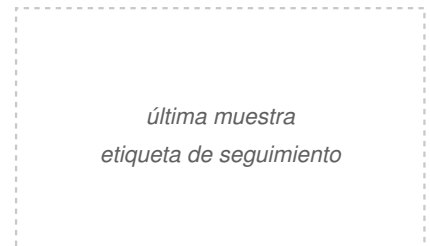


*última muestra
etiqueta de seguimiento*

EID:4258848

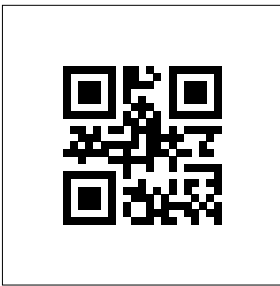


Machine ID
803068
Make/Model
Caterpillar 803068

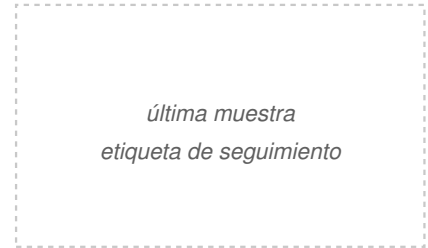

EID:4258851



Machine ID
320015
Make/Model
Kaeser 320015

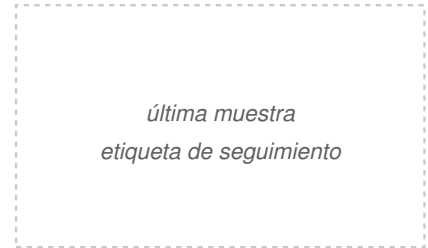

EID:4258846